


Pedaliera comando strumenti a leva A-dec

Panoramica

La pedaliera comando strumenti controlla il flusso dell'aria motrice inviato al manipolo che è stato selezionato ed invia un segnale pneumatico che attiva il flusso di aria e acqua di raffreddamento (spray).

L'interruttore accessori/chip air attiva il funzionamento di un eventuale accessorio o del chip air. La funzione chip air invia un getto d'aria attraverso il manipolo, senza attivarne la fresa. Il funzionamento dell'accessorio dipende dal tipo di accessorio eventualmente integrato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore A-dec autorizzato.

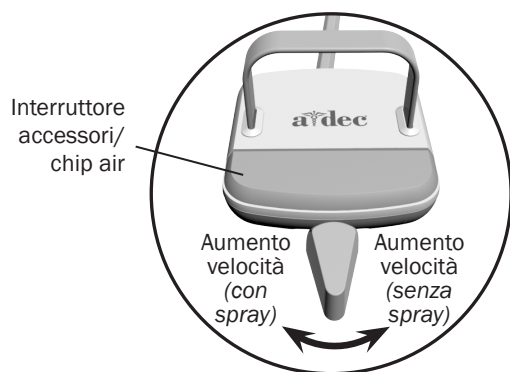

Attivazione e funzionamento dei manipoli

Per attivare un manipolo, sollevarlo dal portastrumenti o tirare la frusta in avanti. Utilizzare la pedaliera comando strumenti per mettere in funzione il manipolo selezionato.

Funzionamento	Procedura
Attivare un manipolo con acqua di raffreddamento.	Spostare la leva a sinistra. Continuare a spostare per aumentare la velocità.
Utilizzare un manipolo senza spray di raffreddamento.	Spostare la leva a destra. Continuare a spostare per aumentare la velocità.
Attivare l'accessorio opzionale o il chip air.	Premere sull'interruttore accessori/chip air.*
Attivare la telecamera endorale.	Spostare la leva a sinistra o destra per acquisire un'immagine.*

* Contattare il rivenditore A-dec autorizzato per domande sul funzionamento o la configurazione degli accessori A-dec integrati.



NOTA: il funzionamento della pedaliera comando strumenti può essere invertito da un tecnico (spray attivo muovendo la leva verso destra, spray disattivo verso sinistra). Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore A-dec autorizzato.



NOTE: per informazioni sulla regolazione dei manipoli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso incluse con la faretra odontoiatrica.

Specifiche e garanzia

Le informazioni sulla garanzia vengono fornite nel documento *Informazioni di legge, specifiche e garanzia* (codice articolo 86.0221.04) disponibile alla sezione Documentazione nel sito www.a-dec.com.



Sede centrale A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA

Tel: 1.800.547.1883 (solo USA/Canada)
Tel: 1.503.538.7478 (fuori da USA/Canada)
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel: 1.800.225.010 (solo Australia)
Tel: +61 (0)2 8332 4000 (fuori dall'Australia)

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Regno Unito

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inghilterra
Tel: 0800 ADECUK (233285) (solo Regno Unito) Tel:
+44 (0) 24 7635 0901 (fuori da Regno Unito)

86.0559.04 Rev B
Copyright 2015 A-dec Inc.
Tutti i diritti riservati.