


A-dec杆式脚踏开关

概览

此脚踏开关可控制已启动的牙科手机的驱动气以及控制冷却气和冷却水的切换。

附件/吹屑开关可启动附件功能或吹屑功能。吹屑功能可在牙科手机不启动手机车针的情况下为其输送一股喷射气流。附件功能依赖于集成的配件设备。有关详细信息，请联系您当地的A-dec授权经销商。

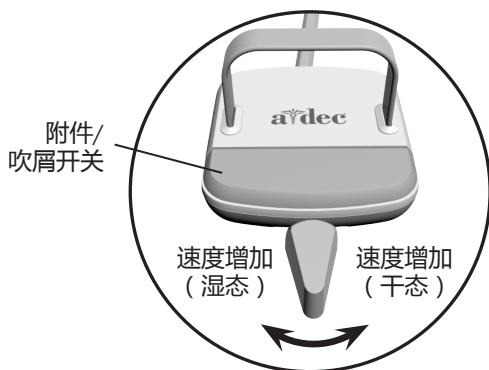

启动和操作牙科手机

要启动牙科手机，请将其从挂架上提出或向前拉动伸缩杆。然后使用脚踏开关执行所需的牙科手机操作。

操作	步骤
运行带冷却水的牙科手机。	将操纵杆移至左侧。位置越远（相对于中心位置），速度越快。
运行不带冷却水的牙科手机。	将操纵杆移至右侧。位置越远（相对于中心位置），速度越快。
运行可选附件或吹屑功能。	踩下附件/吹屑开关。*
操作口腔内窥镜。	将操纵杆移至左侧或右侧以捕捉图像。*

* 有关集成的A-dec附件的操作或配置，请联系您当地的A-dec授权经销商。



注意 杆式脚踏开关左右方向的功能可能已被技术人员对换（左方向更改为干态，右方向更改为湿态）。有关详细信息，请联系您当地的A-dec授权经销商。



注意 有关牙科手机调节的信息，请参考您的牙科治疗台附带的使用说明。

规格和质量保证

质量保证信息在《法规信息、规格和质量保证》文档（零件编号 86.0221.06）中提供，该文档位于www.a-dec.com的文档库中。



A-dec总部

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132

美国

电话：1.800.547.1883（美国/加拿大境内）

电话：1.503.538.7478（美国/加拿大境外）

传真：1.503.538.0276

www.a-dec.com

A-dec澳大利亚分公司

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020

澳大利亚

电话：1.800.225.010（澳大利亚境内）

电话：+61 (0)2 8332 4000（澳大利亚境外）

A-dec 中国

A-dec（杭州）牙科设备有限公司
钱江经济开发区顺风路 528 号

杭州市邮编：311106

中国浙江省

电话：+1.503.538.7478

A-dec英国分公司

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

英格兰

电话：0800 ADECUK (233285)（英国境内）

电话：+44 (0) 24 7635 0901（英国境外）

86.0559.06 Rev B
版权所有2015 A-dec Inc.
保留所有权利。