


Control de pie con palanca A-dec

Descripción general

El control de pie regula el aire de accionamiento hacia la pieza de mano activa y proporciona una señal de aire que activa el flujo del refrigerante de aire y del refrigerante de agua.

El interruptor de soplador/accesorio activa una función accesoria o el soplador. El soplador envía un chorro de aire por la pieza de mano sin activar la fresa de la pieza de mano. La función accesoria depende de su dispositivo accesorio integrado. Para obtener más detalles, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de A-dec.

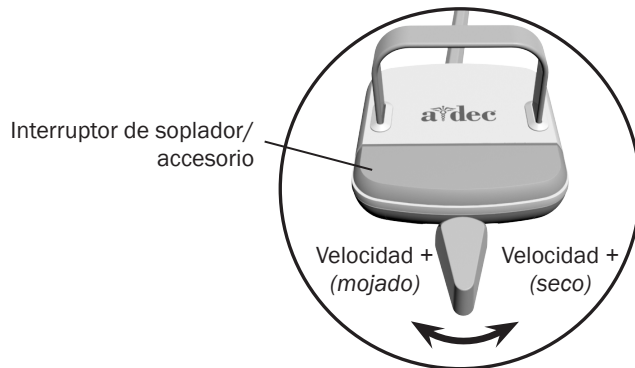

Activación y operación de las piezas de mano

Para activar una pieza de mano, levántela del soporte o mueva la conexión flexible hacia adelante. Utilice el control de pie para llevar a cabo la operación de pieza de mano deseada.

Operación	Procedimiento
Active una pieza de mano con agua refrigerante.	Mueva la palanca hacia la izquierda. Mueva un poco más para aumentar la velocidad.
Active una pieza de mano sin agua refrigerante.	Mueva la palanca hacia la derecha. Mueva un poco más para aumentar la velocidad.
Active el soplador o el accesorio opcional.	Presione el interruptor de soplador/accesorio.*
Accione la cámara intrabucal.	Mueva la palanca hacia la izquierda o hacia la derecha para capturar una imagen.*

* Comuníquese con su distribuidor autorizado de A-dec si tiene preguntas sobre la operación o la configuración de sus accesorios A-dec integrados.



NOTA Un técnico puede invertir la función del control de pie con palanca (cambiar la orientación izquierda a seco, la orientación derecha a mojado). Para obtener más detalles, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de A-dec.



NOTA Para obtener información sobre el ajuste de las piezas de mano, consulte las instrucciones de uso que se proporcionan con el sistema dispensador.

Especificaciones y garantía

La información sobre la garantía se proporciona en el *documento Información reguladora, especificaciones y garantía* (Núm. Pieza 86.0221.27) que está disponible en la Biblioteca de documentos, en www.a-dec.com.



Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
EE. UU.

Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: 1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel: +61 (0)2 8332 4000 fuera de Australia

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, China
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Reino Unido

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Inglaterra
Tel: 0800 ADECUK (233285) dentro del Reino Unido
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 fuera del Reino Unido

86.0559.27 Rev B
Derechos de autor 2015 A-dec Inc.
Todos los derechos reservados.