


## 使用方法

# A-decレバーフットコントロール

### 概要

フットコントロールは起動中のハンドピースの駆動空気を調節し、冷却空気や冷却水の流量を起動する空気信号を提供します。

アクセサリ/チップブロースイッチはアクセサリ機能またはチップブローを起動します。チップブローは、ハンドピースの掘削器具を起動させずに、ハンドピース全体に空気噴流を送ることができます。アクセサリ機能は、統合されたアクセサリ装置によって異なります。詳細はA-dec取扱店にお問い合わせください。

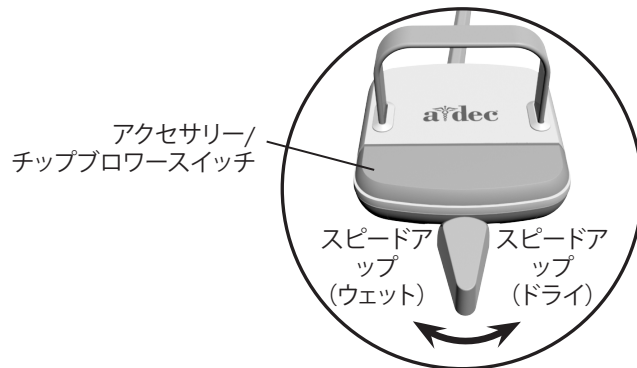

### ハンドピースの起動と操作

ハンドピースを起動するには、ハンドピースをホルダーから持ち上げるかホイップを前方に引き出します。ハンドピースを目的どおりに操作するには、フットコントロールを使用します。

操作	手順
水冷却を使用してハンドピースを作動させる。	レバーを左に移動します。スピードを上げるには、さらに移動します。
水冷却を使用せずにハンドピースを作動させる。	レバーを右に移動します。スピードを上げるには、さらに移動します。
オプションのアクセサリまたはチップブローを作動させる。	アクセサリ/チップブロースイッチを押します。*
口腔内カメラを操作する。	レバーを右か左に動かし、画像を取り込みます。*

\* 統合A-decアクセサリの操作や構成に関するご質問は、A-decの正規販売代理店にお問い合わせください。



**注** レバーフットコントロール機能は、技術者が反転させることができます(ドライにするには左方向に変更、ウェットにするには右方向に変更)。詳細はA-dec取扱店にお問い合わせください。



**注** ハンドピース調整については、デリバリーシステムに付属の使用説明書を参照してください。

# 仕様/保証

---

保証に関する情報は、『規制情報、仕様、および保証使用方法』（部品番号 (P/N) 86.0221.05) に記載されています。この文書は、[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com) のドキュメントライブラリから入手できます。



## A-dec本社

2601 Crestview Drive  
Newberg, OR 97132  
USA

電話: 1.800.547.1883 米国/カナダ国内

電話: 1.503.538.7478 米国/カナダ国外

ファックス: 1.503.538.0276

[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

## A-dec Australia

Unit 8  
5-9 Ricketty Street  
Mascot, NSW 2020  
Australia

電話: 1.800.225.010 オーストラリア国内

電話: +61 (0)2 8332 4000 オーストラリア国外

## A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.  
528 Shunfeng Road  
Qianjiang Economic Development Zone  
Hangzhou 311106  
Zhejiang, China

電話: +1.503.538.7478

## A-dec United Kingdom

Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ England  
電話: 0800 ADECUK (233285) イギリス国内電  
話: +44 (0) 24 7635 0901 イギリス国外

86.0559.05 Rev B  
Copyright 2015 A-dec Inc.無断  
複写・複製・転載を禁ず。

メーカー製品名	製品名	認証番号	一般的名称	医療機器の分類
A-dec 200	エーデック 200 シリーズ	224ACBZI00041000	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
A-dec 300	エーデック300 シリーズ	221ADBZI00085000	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
A-dec 400	エーデック 400 チェアー	13B1X10049AD0012	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
A-dec 500	エーデック500シリーズ	21700BZG00022000	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
Performer® III	パフォーマーⅢ	21400BZG00022000	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
Decade® Cart	ディケード カート	21000BZG00020000	歯科用ユニット	管理医療機器/特定保守管理 医療機器/設置管理医療機器
NLX Nano	NLX ナノ	221ALBZX00015000	歯科用電気回転 駆動装置	管理医療機器 特定保守管理医療機器
NLX Plus	NLX プラス	221ALBZX00019000	歯科用電気回転 駆動装置	管理医療機器 特定保守管理医療機器