

Referenční příručka k seznamu bodů pro testování obvodové desky



Seznam bodů a funkcí zkoušky viz stránky pro obvodovou desku pro Váš výrobek. Další informace ohledně řešení potíží, servisu, určení součástí, údržby a ostatních záležitostí viz příslušný servisní průvodce nebo servisní referenční příručka ke křeslu A-dec. Aktuální revize dokumentů ke křeslu A-dec jsou k dispozici v knihovně dokumentů na stránkách www.a-dec.com.




POZOR Obvodové desky jsou citlivé na statickou elektřinu. Při kontaktu s obvodovou deskou nebo při propojování s jinou obvodovou deskou je nutné dodržovat bezpečnostní opatření týkající se elektrostatického výboje. Obvodové desky by měli instalovat výhradně elektrikáři nebo kvalifikovaní servisní technici.

Obvodová deska křesla A-dec 200, Performer, Decade a Cascade	2
Obvodová deska křesla A-dec 311\411	3
Obvodová deska křesla A-dec 511	4

Obvodová deska křesla A-dec 200, Performer, Decade a Cascade


- **BKUP** – Zvedá opěradlo křesla.
- **BSUP** – Zvedá základnu křesla.
- **BSDN** – Snižuje základnu křesla.
- **BKDN** – Snižuje opěradlo křesla.
- **PRGM (tlačítko)** – Chcete-li naprogramovat polohy křesla, umístěte křeslo do požadované polohy, stiskněte tlačítko a uslyšíte jeden zvukový signál. Potom během tří sekund umístěte přepínač do jedné z poloh PRGM a uslyšíte tři zvukové signály potvrzující nastavení polohy.
- **PRGM 0** – Předvolba polohy křesla 0, obvykle používaná jako poloha pro nasednutí/sesednutí pacienta.
- **PRGM 1** – Předvolba polohy křesla 1, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 2** – Předvolba polohy křesla 2, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 3** – Předvolba polohy křesla 3, obvykle používaná pro sklopení opěradla do polohy určené k rentgenovému vyšetření/vyplachování. Odstraňte přepínač a vraťte jej zpět za účelem vrácení křesla do původní polohy.
- **EN/DIS TP/FS** – **Poznámka:** Tato poloha není funkční u desek vyrobených před 6/2005. Chcete-li aktivovat/deaktivovat tlačítka Program a Preset na ovládacím panelu/nožním spínači, umístěte přepínač do této polohy a potom stiskněte a přidržte tlačítko, které chcete aktivovat/deaktivovat. Tři zvukové signály znamenají, že je tlačítko aktivováno. Jeden zvukový signál znamená, že je tlačítko deaktivováno.
- **FACT DEFAULT** – Obnovuje nastavení předvoleb křesla do výchozího nastavení.
- **BK POT** – Chcete-li ověřit napětí potenciometru polohy opěradla, umístěte kladnou elektrodu měřiče napětí na levou svorku bodu zkoušky BK POT a zápornou elektrodu na levou svorku bodu zkoušky SPARE.
- **BS POT** – Chcete-li ověřit napětí potenciometru polohy základny, umístěte kladnou elektrodu měřiče napětí na levou svorku bodu zkoušky BS POT a zápornou elektrodu na levou svorku bodu zkoušky SPARE.
- **SPARE** – Poloha nečinnosti pro přepínač.
- **SPARE** – Poloha nečinnosti pro přepínač.

Tlačítko PRGM

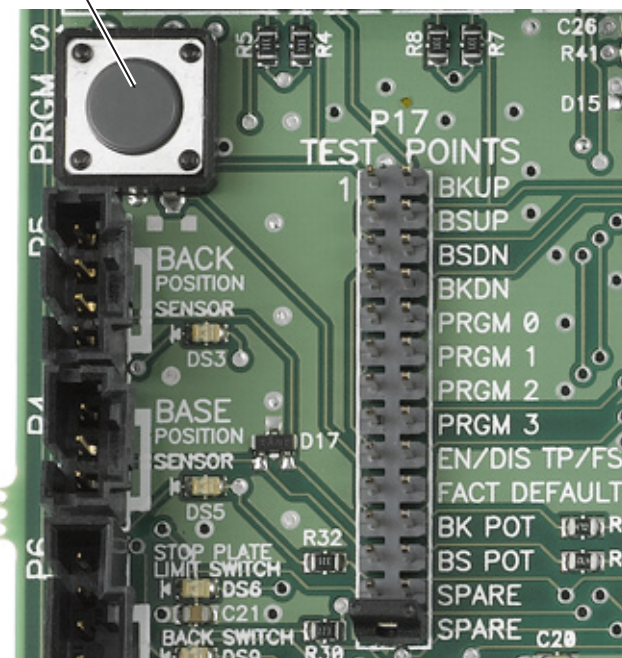

Obvodová deska křesla A-dec 311\411

- **SPARE** – Poloha nečinnosti pro přepínač.
- **FACT DEFAULT** – Obnovuje nastavení předvoleb křesla do výchozího nastavení.
- **BACK UP** – Zvedá opěradlo křesla.
- **BACK DOWN** – Snižuje opěradlo křesla.
- **BASE UP** – Zvedá základnu křesla.
- **BASE DOWN** – Snižuje základnu křesla.
- **PRGM MEMORY** – Chcete-li naprogramovat polohy křesla, umístěte křeslo do požadované polohy, umístěte přepínač do této polohy a uslyšíte jeden zvukový signál. Potom přepínač umístěte do jedné z poloh PRGM a uslyšíte tři zvukové signály potvrzující nastavení polohy.
- **PRGM 0** – Předvolba polohy křesla 0, obvykle používaná jako poloha pro nasednutí/sesednutí pacienta
- **PRGM 1** – Předvolba polohy křesla 1, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 2** – Předvolba polohy křesla 2, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 3** – Předvolba polohy křesla 3, obvykle používaná pro sklopení opěradla do polohy určené k rentgenovému vyšetření/vyplachování. Odstraňte přepínač a vraťte jej zpět za účelem vrácení křesla do původní polohy.
- **EN/DIS TP/FS** – **Poznámka:** Tato poloha není funkční u desek vyrobených před 6/2005. Používá se k aktivaci/deaktivaci tlačítek Program a Preset na ovládacím panelu/ nožním spínači nebo ke správě měkkých limitů základny.
 - **Aktivace/deaktivace tlačítek** – Umístěte přepínač do této polohy a potom stiskněte a přidržte tlačítko touchpadu/ nožního přepínače, které chcete aktivovat/deaktivovat. Tři zvukové signály znamenají, že je tlačítko aktivováno. Jeden zvukový signál znamená, že je tlačítko deaktivováno.
 - **Nastavení měkkého limitu základny** – Umístěte křeslo do požadované polohy, umístěte přepínač do této polohy a stiskněte a přidržte tlačítko BASE UP nebo BASE DOWN, dokud neuslyšíte tři zvukové signály.
 - **Odstranění měkkého limitu základny** – Umístěte přepínač do této polohy a stiskněte a přidržte tlačítko BASE UP nebo BASE DOWN, dokud neuslyšíte tři zvukové signály potvrzující, že bylo nastavení deaktivováno.
 - **Změna měkkého limitu základny** – Odstraňte limit a potom resetujte.

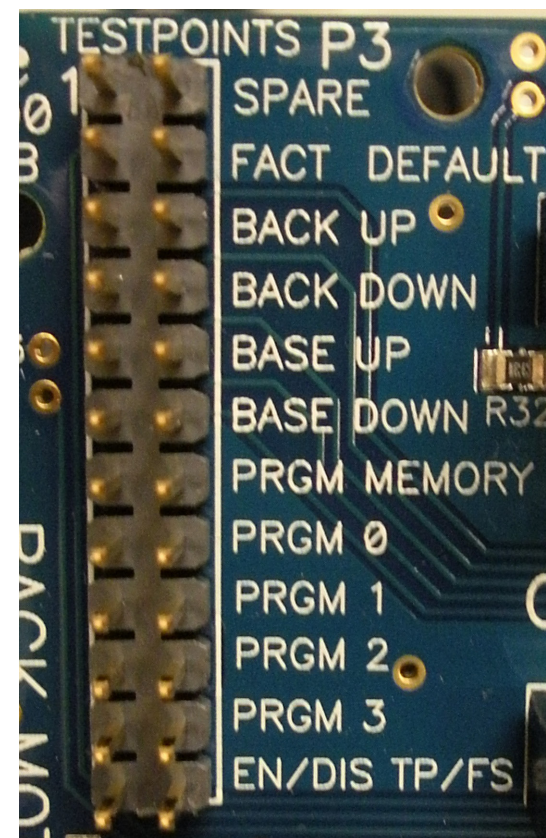

Obvodová deska křesla A-dec 511

- **SPARE** – Poloha nečinnosti pro úložiště přepínače.
- **FACT DEFAULT** – Obnovuje nastavení předvoleb křesla do výchozího nastavení.
- **BACK UP** – Zvedá opěradlo křesla.
- **BACK DN** – Snižuje opěradlo křesla.
- **BASE UP** – Zvedá základnu křesla.
- **BASE DN** – Snižuje základnu křesla.
- **PROGRAM** – Chcete-li naprogramovat polohy křesla, umístěte křeslo do požadované polohy, umístěte jumper do této polohy a uslyšíte jeden zvukový signál. Potom jumper umístěte do jedné z poloh PRGM a uslyšíte tři zvukové signály potvrzující nastavení polohy.
- **PRGM 0** – Předvolba polohy křesla 0, obvykle používaná jako poloha pro nasednutí/sesednutí pacienta.
- **PRGM 1** – Předvolba polohy křesla 1, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 2** – Předvolba polohy křesla 2, obvykle používaná pro polohu pacienta na zádech.
- **PRGM 3** – Předvolba polohy křesla 3, obvykle používaná pro sklopení opěradla do polohy určené k rentgenovému vyšetření/vyplachování. Odstraňte přepínač a vraťte jej zpět za účelem vrácení křesla do původní polohy.
- **EN/DIS TP/FS** – **Poznámka:** Tato poloha není funkční u desek vyrobených před 6/2005. Používá se k aktivaci/deaktivaci tlačítek Program a Preset na ovládacím panelu/nožním spínači nebo ke správě měkkých limitů základny.
 - **Aktivace/deaktivace tlačítek** – Umístěte přepínač do této polohy a potom stiskněte a přidržte tlačítko ovládacího panelu/nožního spínače, které chcete aktivovat/deaktivovat. Tři zvukové signály znamenají, že je tlačítko aktivováno. Jeden zvukový signál znamená, že je tlačítko deaktivováno.
 - **Nastavení měkkého limitu základny** – Umístěte křeslo do požadované polohy, umístěte přepínač do této polohy a stiskněte a přidržte tlačítko BASE UP nebo BASE DN, dokud neuslyšíte tři zvukové signály.
 - **Odstranění měkkého limitu základny** – Umístěte přepínač do této polohy a stiskněte a přidržte tlačítko BASE UP nebo BASE DN, dokud neuslyšíte tři zvukové signály potvrzující, že bylo nastavení deaktivováno.
 - **Změna měkkého limitu základny** – Odstraňte limit a potom resetujte.

