


A-dec® 300

a dec®

A-decの優位性

快適性を追求したデザイン

A-decは、ボルトにいたるまで、細部に徹底的にこだわりぬいています。そのためA-decでは、歯科用機器の大部分を原料から製造しています。これは、品質を保証する重要なファクターです。これらの部品は肉眼で確認できないかもしれませんが、A-dec製品の一つ一つが生活に快適さと機能性をもたらします。これはお客様のビジネスにとっては、何より重要です。

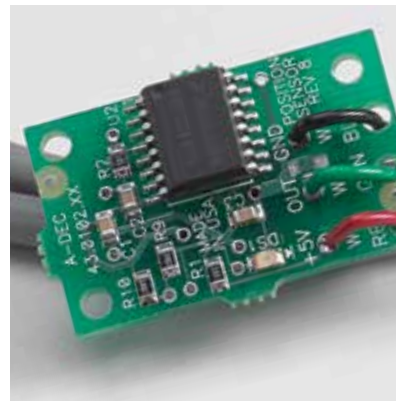

コントロールブロック - 特許取得済みのデザインにより、作動するたびに清潔な処理水が注水されます。

リフトシリンダー - A-decが構築、設計した、少ないパーツで油圧の強いシリンダーです。

チェアポジションセンサー - 精巧な電子センサーとデジタル信号を採用しているA-decテクノロジーです。







A-dec 300: 特長

デザイン

しっかりとしたベースプレートは、頑丈なチェアの基本です。A-dec 300は安定したフットレスト、および20年間培ってきた油圧リフトシリンダーによって患者の位置を静かに、スムーズ移動できます。

値

A-dec 300はモジュール型ソリューション設計であり、1つのシステムとして、必要な価格帯から必要な機能をお選びいただけます。

柔軟性

トラディショナルとコンチネンタルをご用意しています。左手/右手専用デリバリーと両手用のRadius®スタイル構成のいずれをお選びいただいても、ハンドピースと補助器具は常に自然に手の届く範囲にあります。


快適さ

圧力を分散した起伏のある表面とバーチャルピボット背もたれにより、患者はサポート感を得られリラックスできます。181kg(400ポンド)までの患者を快適に支えます。

アクセス

二重接続型ヘッドレストは心地よく患者をリラックスさせ、スリムな側面と超薄型の背板が治療時に手を届きやすくする最適な設計になっています。長年の技術から生まれたこの組み合わせから、治療時の姿勢をより快適にし、口腔にもスムーズに手が届くようになります。





人間工学と経済性

究極の快適さが実現不可能とは、誰が言っているのでしょうか。A-decがデザインする患者用のチェア、歯科医師用または歯科助手用ツールはすべて何十年にもわたる調査、検討、試験、および改良に裏付けられています。A-decは常にシンプルな曲線、スムーズなライン、身体に合った輪郭について調査を重ね、究極の効率と快適さを提供しています。快適さの保証：手頃な価格のA-dec 300も例外ではありません。

好みに合わせて調整

PedestalとRadiusのスタイルからお選びいただけます。どちらのスタイルも治療器具は手の届く範囲にあり、治療が中断されません。



A-dec 300 Pedestalサポートセンター

トラディショナルとコンチネンタルのデリバリーによって、治療にもテクノロジーが及んでいます。左手/右手専用デリバリーでは、アマルガム分離器に手が届きやすく、フローボックスは滑らかな曲線型であるため、ハードウェアの露出を減らすことができます。



A-dec 300 Radiusスタイルシステム

左手と右手の操作を簡単に切り替えることができます。単一またはデュアル Radiusマウントはチェア正面で回転し、治療中に患者にスムーズに近づくことができます。

レバーフットコントロール

A-decのレバー・フット・コントロール・オプションによるコントロールが可能です。直観的なウェット/ドライの交互操作や、チップブローワ/アクセサリボタンを使用して、患者の治療に集中できます。最小限の足元の動作で、電気と空気の両方のハンドピースの細かな調節が可能です。

豊富なオプション



アームレスト付き縫合式カバー



トラディショナル



スタンダードタッチパッド



ディスクフットコントロール



アームレストなしのシームレスなカバー



コンチネンタル



デラックスタッチパッド



レバーフットコントロール

縫合式カバーとアームレスト

すべて最高のチェアからお選びいただけます。高級な縫合式カバーや清潔に保てるシームレスなカバーから、オプションの2ポジションアームレストやアームレスト無しまで豊富なオプションをご用意しています。

デリバリーシステム

医師とスタッフの動きに対応トラディショナルとコンチネンタルのどちらのデリバリーシステムも、クワッドボルトの口腔用光源と2つの補助器具を統合できます。

タッチパッド

指先でアクセスできるので椅子の調整は容易になり、歯科ライトとスピットンもすぐにアクセスできるようになります。オプションのデラックスタッチパッドを使用すれば、電動モーター、カメラ、歯石除去器といった統合型の臨床用器具も操作可能です。

フットコントロール

チップブロー - オプション付きのディスクスタイル - A-decレバースタイルでは、電動ハンドピースとエアハンドピースを微調整できます。



固定ガラススピットン



3ポジションホルダー



4ポジションホルダー



デュアル2ポジションホルダー



A-dec 300 LED



A-dec 500 LED



Radiusモニターマウント



ライトモニターマウント



リンクアーム付きライトモニターマウント



回転式硝子磁器スピットン

スピットン

ガラスと溶化磁器のどちらがお好みですか。固定式ですか、回転式ですか？ どちらのボウルにも適切なタイミングで動作するコップ給水機能およびボウル洗浄機能があります。

歯科助手用ホルダー

歯科助手の医療器具は、歯科助手が最も使いやすい場所に置いてください。調整可能な3ポジションまたは4ポジションホルダーは、チェアマウント、スピットンマウント、または伸縮式アームとして利用できます。

治療用ライト

正確な照明は必須です。A-dec LEDライトは、バランスの取れた強度とシャドウのない均一な光パターンを提供します。椅子がentryまたはexit位置に移動するとき、自動的にon/off (オン/オフ) します。


モニターマウント

相談にも、指導にも、確認にも。モニターマウントは回転できるため、座位または仰臥位のどちらからでも見ることができます。固定スタイル、フローティング回転、固定ハンドルなどオプションを自由に調節し、さまざまな位置にマウントしてください。

シームレスカバー



色はお使いの環境に合わせてお選びください。そのため、A-decでは、さまざまなカラーをご用意し、シームレスと縫合式カバーからお選びいただけます。

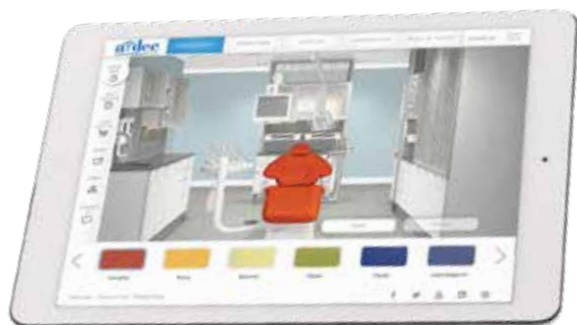

サンプルは
a-dec.com/InspireMeからご依頼ください。

縫合式カバー



実際の色は異なります。色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

仕様

A-dec 300デンタルチェアー

上昇高さの範囲	349 mm~800 mm (13.75インチ~31.5インチ)、最低位置375 mm (14.75インチ) (デュアルマウント時)
薄型でフレキシブルな背板	32 mm (1.25インチ)、シームレス
駆動システム	ハイブリッド駆動 (電動傾斜、油圧ベース)
背もたれとベースストップスイッチ	あり。障害物を検出すると、下方向の動きが停止します
ヘッドレスト	二重接続型グライド (ノブスタイル)
内蔵300W電源	あり
フットスイッチ	オプション
マウント機能	フローティング - 2インチのポストマウント、Pedestal、またはRadius (単一または二重マウント)
張り地のオプション	縫合式またはシームレス

デリバリーシステム

	A-dec 300コンチネンタル	A-dec 300トラディショナルデリバリーシステム
コントロールブロック	標準3ポジション オプションの4ポジション	標準3ポジション オプションの4ポジション
右手用/左手用の変更	あり	あり
チューブオプション	ビニールまたはシリコン	ビニールまたはシリコン
ヘッドピースホルダーのポジション	4	4
ブレーキハンドル	標準で1、2つ目はオプション	標準で1、2つ目はオプション
タッチパッドのオプション	なし、標準、またはデラックス	なし、標準、またはデラックス
クワッドボルト口腔内光源	オプション	オプション
フットコントロール	標準、チップブロー、またはレバー	標準、チップブロー、またはレバー
アームシステム	エアブレーキ付きのバランス調節フレックスアーム A-dec 333 - Radiusマウント A-dec 335 - Supportマウント	エアブレーキ付きのバランス調節フレックスアーム A-dec 332 - Radiusマウント A-dec 334 - Supportマウント 手動による高さが調整可能 A-dec 336 - Radiusマウント









A-dec本社

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
電話: 1.800.547.1883 米国/カナダ国内
電話: +1.503.538.7478 米国/カナダ国外
ファックス: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

電話: 1.800.225.010 オーストラリア国内
電話: +61.(0)2.8332.4000 オーストラリア国外

A-dec Cina

電話: 400.600.5434 中国内
電話: +86.571.89026088 中国外

A-dec United Kingdom

電話: 0800.233285 英国内
電話: +44.(0).24.7635.0901 英国外

選任製造販売業者
Ivoclar Vivadent 株式会社
〒133-0033 東京都文京区本郷1-28-24
電話: 03-6801-1301 ファックス: 03-5844-3657

一般的名称: 歯科用ユニット / 販売名: エーデック300 シリーズ
認証番号: 221ADBZ100085000 / 管理医療機器 / 特定保守 (設置)

ここに表示されている製品の色や形態は実際の素材とは異なることがあり、また予告なく変更される場合があります。正確な色サンプルや最新の製品情報については、A-decの正規販売代理店にご連絡ください。

本書に記載のすべての商標は、米国および諸外国におけるA-dec、その提携会社、およびそれらのサプライヤーの商標権の対象となります。