



A-dec® 500®

a dec®

让您发挥自己的最佳水准。

我们致力于推动牙科行业向前发展。
我们相信简约方达极致,智慧蕴含其中,
深入理解是我们做一切事物的基础。
我们坚持创新。平衡工作与生活,让您
在一天工作结束时仍留有余力。
在 A-dec®, 我们信奉的一点是,让牙科
医生专注最重要的事:您的患者。



我们的信条。



体验新升级 A-DEC 500[®]。



重新定义业界传奇。

在这个充斥复杂技术和噪声的世界，我们为您带来蕴含智慧的简约和从容的心态。新升级A-dec 500功能设计全面且直观，无声融入您的工作之中，操作随心所欲，毫无卡顿。体验全新一代的A-dec 500。

操作便利 所需一切皆触手可及。

灵活集成 灵活的设计让您可以根据当下需要集成您挑选的临床器械。

智能控制 个性化定制、易于操作。随时添加更多器械。一切尽在掌握。

关怀备至 舒适性和稳定性带来优质的患者体验。






[01]

体验最便利的 操作路径。

触手可及。

轻松定位和拿取您所需的一切。
以健康的坐姿靠近您的患者，视野更加清晰，动作幅度最小。舒适操作之间未曾发觉时间流逝。

可轻松调节。

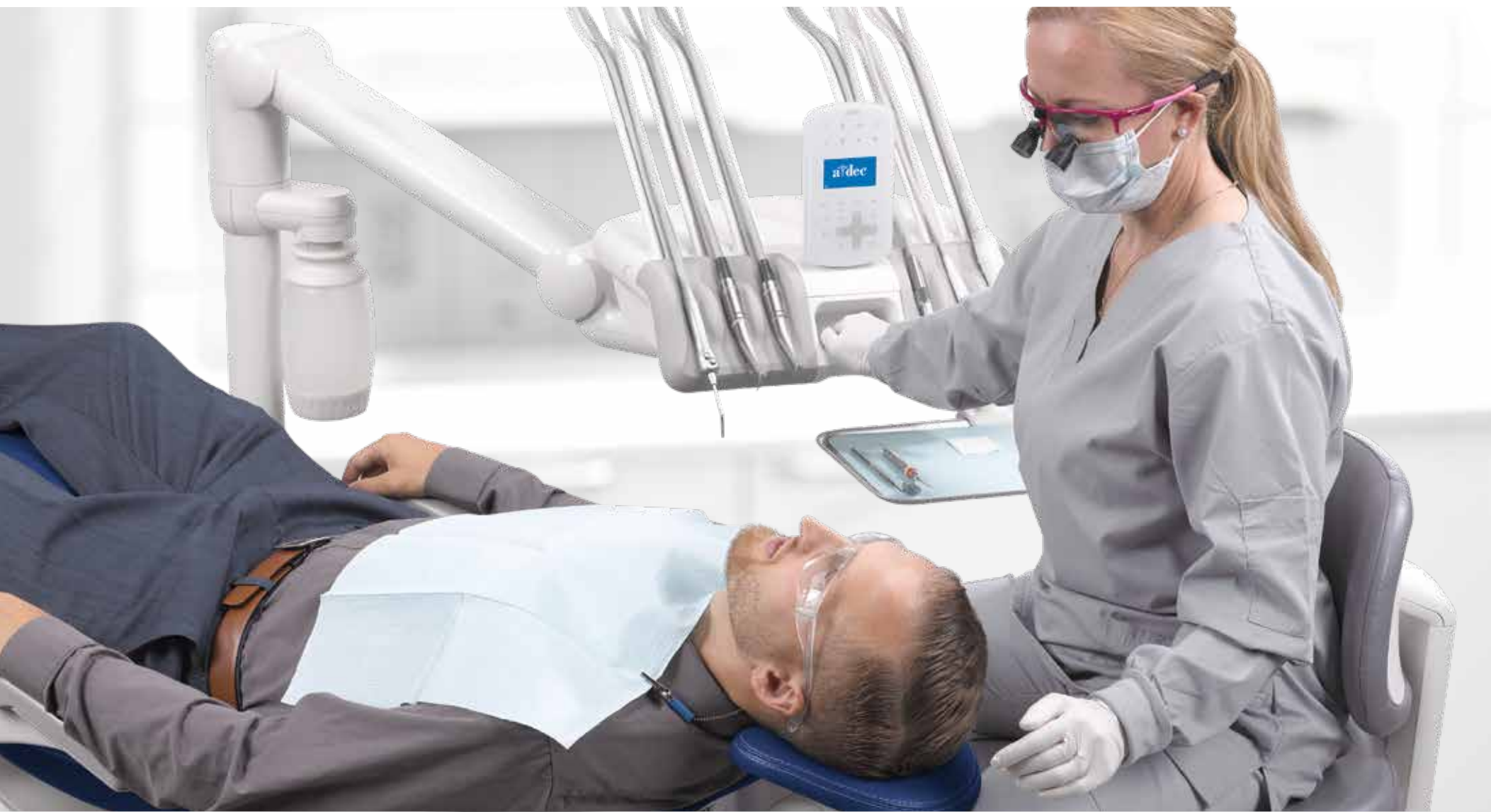

全神贯注。

的确如此。您可以专注眼前的治疗过程，无需移开视线去启动、关闭、定位、放置器械。
我们一直努力保持设备和技术的简单易用性，让您面对患者从容不迫。

自如定位 可轻松精准地将治疗台定位到您需要的位置，放开即锁定。

单手调节 使用单手或手指轻松调整牙科治疗台。

左右手互换 几秒内就可切换左右手操作治疗台。居中放置的手柄和屏幕
从任一测皆可方便使用和查看。

超级豪华触控板 动态显示您正在使用的功能，简单易用。

灵敏制动手刹 握住手柄，屈臂制动装置自动释放。专业称之为电容激活，但
您只需了解这个功能毫不费力即可。



面面俱到的定位。



完美地调整头枕

工作时的体态姿势带来差异巨大的体验：漫长的一天或是美好的一天。通过按压操纵杆，您即可调节 A-dec 500 头枕，以获得最佳的口腔视野。

轻薄、可弯折的椅背

A-dec 标志性的超薄椅背和头枕使您能够在舒适的位置工作：双腿放在患者椅背下方，双肘自然贴在身体两侧。



可调整的DELUXE PLUS触控板

可倾斜的屏幕和可旋转的控制手柄，方便您从多个角度进行精确观察。左右手操作者可通过移动治疗台手柄，从任一测获得最佳视野。

延长软管

较长的手机软管减少使用过程中的阻力和疲劳感
(仅 A-dec Continental® 上挂式治疗台提供)

可移动器械托盘

一体式可伸缩的定制化器械托盘可盛放您需要的一切，同时巧妙利用诊室空间。



[02]

体验灵活的系统集成。



超前的设计。

A-dec产品的设计宗旨是持久耐用, 不过牙科技术日新月异。A-dec 500采用灵活、超前的设计, 完美贴合您的当前所需, 并且未来还可随着您的业务发展而不断升级。

巧妙的移动。



我非常喜欢这个牙科治疗台！
它移动起来毫不费力，我几乎
感觉不到它的重量，而且集成
技术让它很高效且易于使用。

MEGAN NEVILLS, DMD

ALOHA, OR, 美国



赋予更多选择。

我们努力确保新升级A-dec 500治疗台可以集成更多的临床装置,以保证您可以选择自己需要的器械。即使您未来的工作业务发生了变化,您大可选择重新配置治疗台,拥有全新的功能。

定制化配置 6个控制端接头,集成您想拥有的所有功能:
从内窥镜和洁牙机到光固化机和电动马达。

可调节牙科手机托架 每一个位置都可以移动,从而可倾斜放置牙科手机,以便在使用时更易于抓握,而在不用时可将其放回直立位置以保证安全。







[03]

体验智能控制。

直观且可预测。

这是一种与生俱来却难以言喻的默契。从容应对是因为您了解设备直观可预测，响应及时，辅助您的每一步精密动作。因此，您可以专注于最重要的事：您的患者。

激发信心。



此动彼应。

细节的投入和整体把控让您可以不假思索地流畅操作，激活和关闭临床器械和装置。最终目的是为了让您避免设备的干扰，专注于牙科手术。

智能屏幕 可视化的图标控件仅显示您需要的设置。

自动唤醒 屏幕读数在您拿起器械时显示。

LED 冷却剂指示灯 将牙科手机从托架中取出时，该指示灯亮起，以便您可以毫不犹豫地进行调整。

双用户设置 一键点击将共享设备切换到个性化设置



现代而简约。

整洁简单。

新款Deluxe Plus触控面板将无关信息的影响最小化, 并仅在您需要时动态显示您手上正在进行的手术或任务信息。流行的轻触激活玻璃面板同样易于清洁。

干净极简。





器械记忆设置

为牙科手机设置特定的钻头速度。其他兼容器械亦可使用预设记忆功能。

牙科手机模式

用者基础的牙科手机。在不同手机操作模式之间轻松切换。

A/B 用户设置

可为两位用户提供可编程设置(设定为A/B)。



冷却水

通过屏幕或脚控开关开启/关闭。治疗台指示灯显示您的牙科手机位置。






[04]

体验极致舒适。

舒适而有力的支撑。

刚柔并济的支撑让您的患者舒适就诊，
给予与众不同的良好体验。

一如既往的舒适。

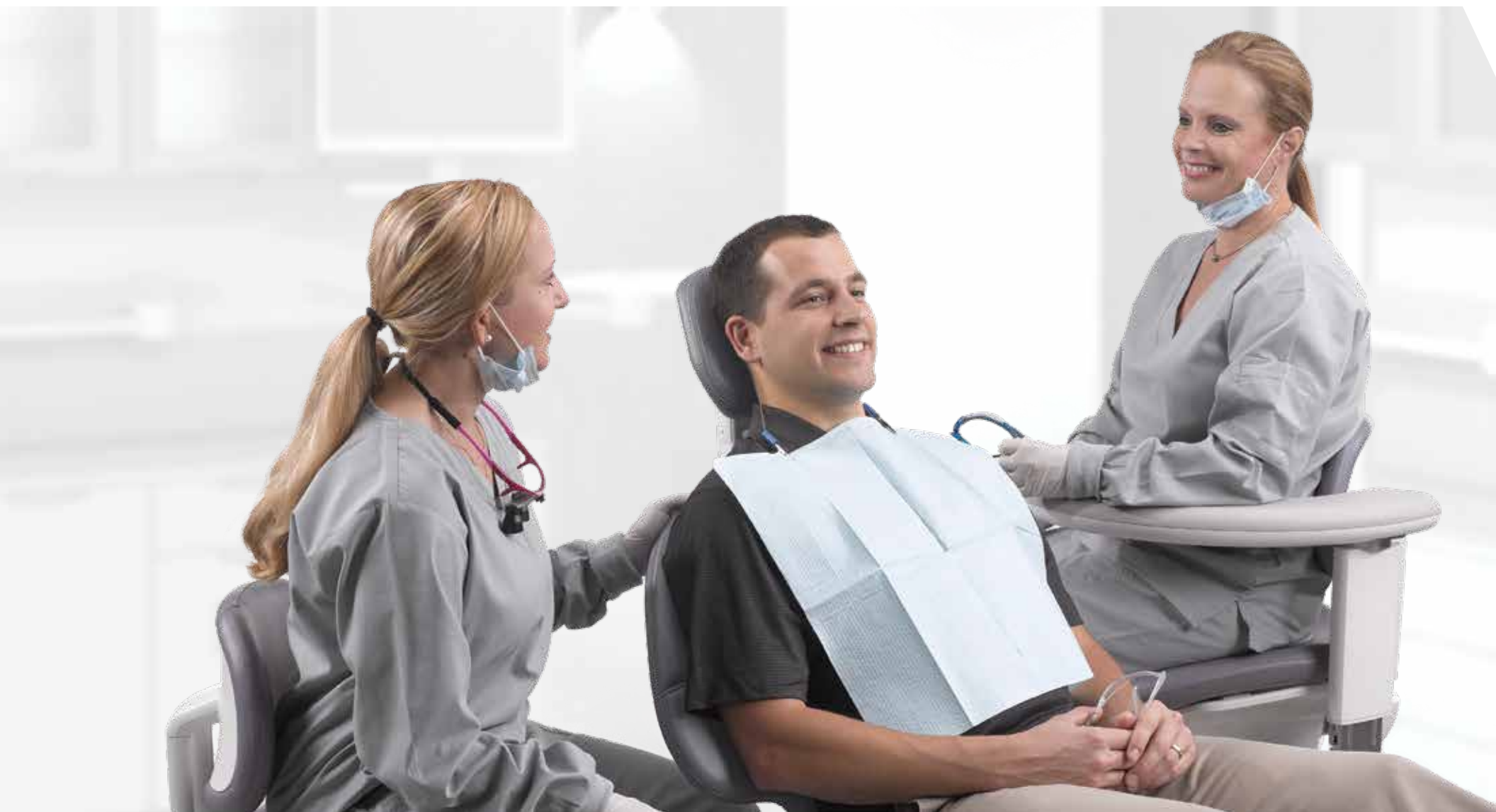

全方位支撑。

舒适是一种感觉还是一门科学？二者皆是。A-dec 500 通过减少压力受力点和应用体压分布测量系统给予流线支撑，保障患者诊疗过程中的舒适。当您的患者放松就诊，您也可以轻松治疗。

双关节滑动头枕 根据患者调整获得稳定支撑。

超薄靠背 轻薄、可弯折的椅背同时兼具功能性。椅背采用魔鬼鱼外形，完美贴合患者的身体曲线，提供全方位支撑，同时为您靠近患者预留足够的空间。

牢固的扶手 当患者需要时提供支撑，不需要时方便移开。

脚踏板翘起 在放倒治疗椅时，脚踏板可平滑升起达9英寸，令患者犹如置身于摇篮之中。患者将倍感放松。



别具匠心的设计。

即刻舒适

无需患者自主调整在牙椅上的姿势来获得舒适。这应由我们来解决。因此我们专为患者入座的即刻体验而设计。

轻缓启动/停止

平稳的液压升降可在患者定位过程中实现安静、轻缓的停止和启动，从而消除升降噪声带来的焦虑感。同时采用了虚拟枢轴，使移动与患者的自然运动同步，无需在椅子放倒或回位后重新调节。

轻松进/出

坚固的多档位扶手在患者进出期间提供稳固支撑。

功能性定位

头枕上的四个可调节旋转点可全方位支撑患者头部。





刚性结构

坚固的结构为您和您的患者减少与移动相关的振动。

平衡稳定

支撑臂可平衡软管重量, 因此你可以高效移动手机, 避免拉拽和产生腕关节疲劳。



适合多种患者
体型



承载量最多可
提高到 227 千克
(500 磅)



位于治疗台中央的手柄和
屏幕同时适合左右手互换
操作





[05]

让它为您服务。

量身定制。

颜色、风格、治疗台选项、脚控开关和器械皆可定制。您大可按照自己的习惯工作，直到完成手术最后一步。在A-dec, 我们乐于为您提供多项选择。

按您想要的方式工作。


根据您的业务选择治疗台款式。

有三个方面需要考虑：您、您的牙科团队和患者。在为患者提供安心舒适的同时，A-dec 兼顾您工作习惯所需的多样化配置。
这不正是我们共同的追求吗？



全方位人体工程学舒适。

533 Continental治疗台, 圆盘脚控开关, 572L LED口腔灯

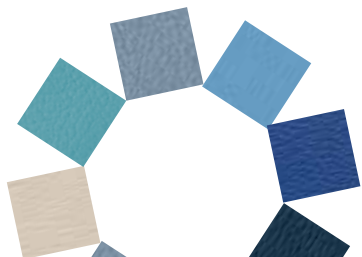



让它为您服务
A-dec 500牙科治疗台



视野之外, 安心惬意。

541 12 o'clock治疗台, 圆盘脚控开关, A-dec Inspire® 591 边柜。



集成、精简。

532 Traditional牙科治疗台, 拨杆式脚控开关, 572L LED灯

您的风格, 由您做主。



缝制皮垫



无缝皮垫


可选的缝制皮垫颜色



设计您的牙科手术室
a-dec.com/inspireme

缝制皮垫标配撞色缝线。

可选的无缝皮垫颜色

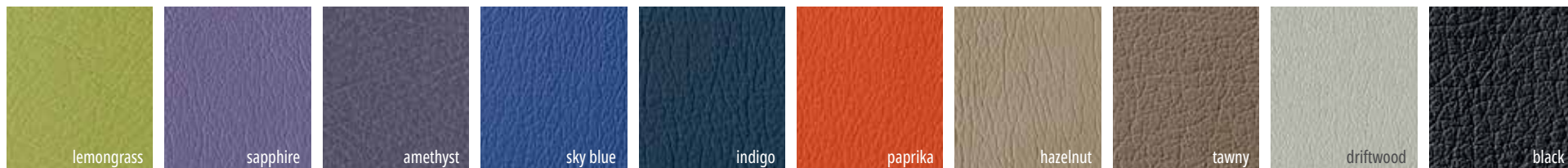

让它为您服务
A-dec 500牙科治疗台

灵活选配。

▼ 牙科治疗台



Continental




12 o'clock



缝制



Traditional

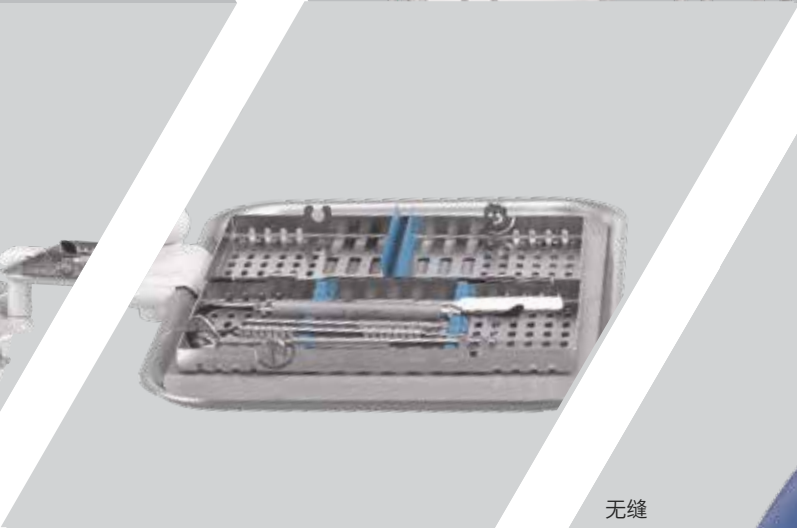

▲ 托盘



无缝

▲ 皮垫

▲ 牙科治疗台

致力于为您提供全面解决方案。

没有两位医生是相同的, 我们的设备可以为您和您的团队定制最具高效的产品配置。


▼ 口腔灯




▼ 显示器支架



▲ 痰盂

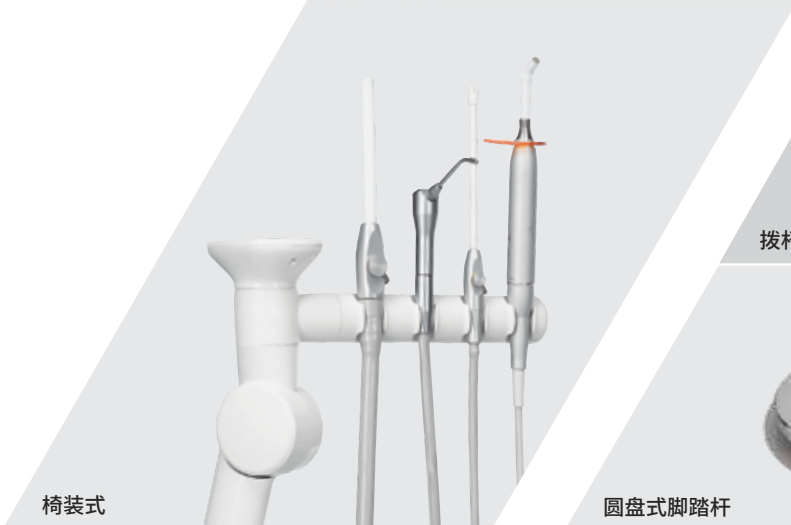

椅装式

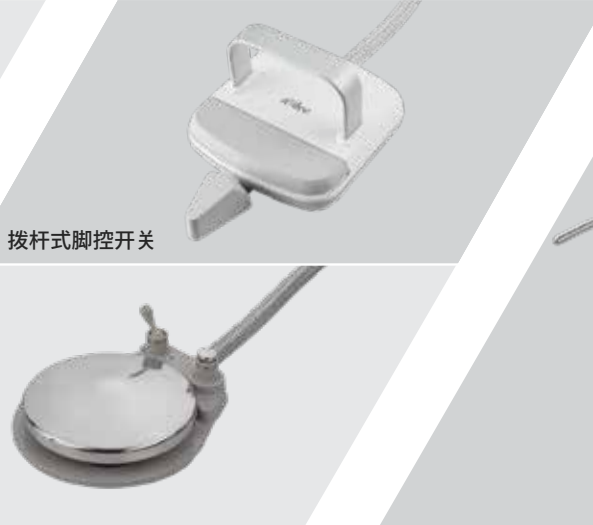

拨杆式脚控开关

圆盘式脚踏杆



▲ 牙医助理托架

▲ 脚控开关

▲ 一体化器械和设备

技术规格和细节。

A-dec 511牙科治疗椅

椅座高度范围	最低位:343毫米(13.5英寸),368毫米(14.5英寸),A-dec 300上有两个安装位置。最高位:800毫米(31.5英寸)
椅背	超薄25毫米(1英寸)灵活椅背*(*基于无缝皮垫)
头枕	双关节滑动头,释放柄
扶手	2档位扶手
治疗椅最大旋转角度	60°(从中间向两侧各30°)
电源	300瓦
治疗椅控制	牙科治疗台上的触控板或脚控开关
升降系统	平缓启动/停止液压驱动
安装款式	Radius左/右,专用于左/右手支柱上安装
皮垫选项	缝制或无缝
UL负载额定值	UL额定负载为227千克(500磅) 最大患者负载(负载额定值基于4X(2000磅/907千克)超负载静态测试的UL要求)

支撑中心

	461支撑中心	
	标配	可选配
痰盂(配备可编程的口杯注水和痰盂冲洗计时器)	玻化瓷	
痰盂旋转	±45°	
供水系统	无	2升水瓶
适用于汞合金分离器		是(汞合金分离器或水瓶)
安装款式	后置左/右轴安装式	
口腔灯/显示器支架	否	否

口腔灯

	500 LED口腔灯
色温	5,000K
灯光照射区	95毫米 x 145毫米, 焦距700毫米(3.8英寸 x 5.7英寸, 焦距27.6英寸)
口腔灯亮度(模式选择)	低亮度:15,000勒克斯(1394英尺烛光) 中亮度:25,000勒克斯(2323英尺烛光) 高亮度:30,000勒克斯(2787英尺烛光) 防固化:23,000勒克斯(2137英尺烛光) 黄色光
每小时BTU	77
功率	22瓦
口腔灯控制	触控板、手动开关或通过治疗椅预设自动开/关
光源使用寿命	>40,000小时

显示器支架

	A-dec 482	A-dec 381	A-dec 382 Radius
倾斜式	不固定	不固定	固定
平板显示器最大重量	9公斤(20磅)	9公斤(20磅)	14公斤(31磅)
显示器支架倾斜角度	±45°	±45°	±45°
安装位置	口腔灯灯柱	口腔灯灯柱	治疗椅(一个或两个安装位置)

牙科治疗台

	500 Radius		50012 0'Clock	
型号	A-dec 532 Traditional A-dec 533 Continental		A-dec 541型双功能12 o'clock	
	标配	可选配	标配	可选配
触控板	Deluxe Plus	不适用	Deluxe	标准, 无
脚控开关	附件按钮	拨杆风格	湿/干圆盘, 配有吹屑功能	操纵杆
是否能左/右对换	是	不适用	是	
牙科手机托架孔个数	Continental - 5 + 牙科喷枪 Traditional - 5 + 牙科喷枪	温水牙科喷枪Continental - 5 + 牙科喷枪	Traditional - 4 + 牙科喷枪	温水牙科喷枪
牙科手机软管	硅胶管		硅胶管	
内窥光源	四组输出电压		四组输出电压	
平衡臂系统	易于极定位, 平衡屈臂, 配有气动制动器		手动高度调节	
安装选项	A-dec 511		Preference Collection A-dec Inspire, 独立	
制动手柄	不适用		无	
供水系统	2升水瓶		2升水瓶	
集成	15英尺USB 2.0线缆/ 多达6个控制模块	超强USB集线器	15英尺USB 2.0线缆/多达5个控制模块	超强USB集线器

牙医助理器械

	551牙医助理器械		541双功能12 o'clock治疗台		545 12 o'clock牙医助理器械	
	标配	可选配	标配	可选配	标配	可选配
空气/水牙科喷枪		快速断开(QD)牙科喷枪, 温水QD牙科喷枪	QD牙科喷枪	温水QD牙科喷枪	QD牙科喷枪	温水QD牙科喷枪
触控板	标准触控板		无	标准触控板	无	标准触控板
真空器械	EasyFlex软管 1个排涎装置(SE) 1个强力吸引装置(HVE)	强力吸引装置(HVE), 双塔架	1个排涎装置(SE) 1个强力吸引装置(HVE)	强力吸引装置(HVE), 双塔架	1个排涎装置(SE) 1个强力吸引装置(HVE)	强力吸引装置(HVE), 双塔架
真空吸管	EasyFlex		EasyFlex		EasyFlex	
定位	水平方向调节	水平方向和垂直方向调节	垂直方向手动调节		垂直方向手动调节	
安装位置	治疗椅背部安装		边柜或地板上安装		边柜或地板上安装	

技术规格

A-dec 500牙科治疗台

A legend, *redefined*

a-dec.com/500experience

A-dec总部

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 美国

电话: +1.800.547.1883 (美国/加拿大境内)

电话: +1.503.538.7478 (美国/加拿大境外)

传真: +1.503.538.0276

a-dec.com

A-dec澳大利亚

电话: 1.800.225.010 (澳大利亚境内)

电话: +61.(0)2.8332.4000 (澳大利亚境外)

A-dec中国

电话: 400.600.5434 (中国境内)

电话: +86.571.89026088 (中国境外)

A-dec英国

电话: 0800.233285 (英国境内)

电话: +44.(0).24.7635.0901 (英国境外)

The logo features the lowercase letters 'a' and 'dec' in a serif font, with a stylized caduceus symbol integrated into the letter 'd'.



本文件上的所有商标均受A-dec、其关联机构及其在美国和美国以外国家/地区的集体供应商的商标权的保护。

©2021 A-dec Inc. 保留所有权利。85.0850.06/05-21/Rev B。