

# Seria Stołków A-dec<sup>®</sup>

# Stołków

Stołki zapewniające użytkownikom  
maksymalną efektywność



# Stołki z serii A-dec 500 Performance

## Optymalna wygoda osób pracujących w gabinecie stomatologicznym

Dopiero wtedy można zapewnić pacjentowi najlepszą opiekę, kiedy sam lekarz ma możliwość pracy w komfortowych warunkach. Teraz wygodę użytkownika zapewnia unikatowe, ergonomiczne rozwiązanie siedziska. Model A-dec 500.

Innowacyjny stołek A-dec 500 był przez lata niezwykle starannie projektowany w celu uzyskania maksymalnej wygody użytkownika, a co za tym idzie – jego możliwie najlepszych wyników pracy.






## Stołki zapewniające zdrową postawę ciała

Stołki serii A-dec 500 zostały opracowane w taki sposób, aby dostosowywały się do ruchów ciała i podążały za nimi. Przykładem może być tzw. dynamiczne siedzisko. Każdy element, od ramy nośnej stołka do elastycznych i dopasowujących się do kształtów ciała materiałów, zaprojektowano z myślą o zapewnieniu wygody i podparcia. Łatwo dostępne dźwignie regulacyjne umożliwiają dostosowanie stołka do potrzeb operatora, co pozwala na zachowanie ergonomicznej postawy ciała przez cały dzień.

### Odpowiednia, zdrowa postawa ciała osoby siedzącej

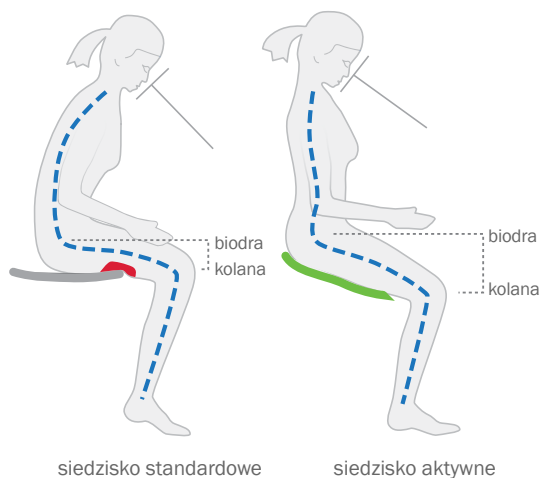

Nasza odpowiedź na potrzeby związane z ergonomią rozpoczyna się od dostosowania sposobu siedzenia, tak aby uniknąć szkodliwego dla kręgosłupa wygięcia w kształcie litery C. Tego typu zdrowa pozycja siedząca nosi nazwę „pozycji aktywnej”. Kiedy użytkownik siedzi w pozycji, w której biodra są powyżej kolan, a siedzisko fotela pochylone jest do przodu, to kręgosłup może zachować zdrowy kształt litery S. Aktywne siedzisko umożliwia zarówno wygodę, jak i bardziej efektywną pracę.

### Cztery punkty regulacji



Właściwa postawa ciała zmniejsza obciążenie stawów i kręgosłupa oraz zapewnia lepsze krążenie krwi w stopach i kończynach. Stołki serii A-dec 500 mają łatwe w zastosowaniu oznakowane dźwignie, które umożliwiają stopniową, dopasowaną do potrzeb regulację, co jest szczególnie istotne przy wielu użytkownikach w ciągu dnia.

### Aktywny system siedziska



Trzy warstwy elastycznego materiału siedzenia zapewniają dostosowanie do każdej zmiany pozycji i do każdego ruchu:

- 1. Piankowa poduszka** (warstwa górna) — decyduje o komforcie.
- 2. Elastyczna warstwa Comfort-flex Armature** (warstwa środkowa) — dostosowująca się do pozycji ciała użytkownika, opracowana na podstawie czterech stref funkcjonalnych.
- 3. Elastyczna rama** (podstawa) — stanowi podparcie podczas wykonywania większych ruchów.

## Stołki A-dec 500

### Dynamiczne oparcie

Nasze innowacyjne stołki A-dec 500 posiadają dynamiczny system regulacji siedzenia, ze specjalnymi strefami funkcjonalnymi, które dopasowują się do kształtów ciała. Strefy te współpracują ze sobą, zapewniając podparcie podczas ruchu, pochylania się oraz pracy. Inne funkcje stołków, między innymi profilowane oparcie, zapewniają kręgosłupowi maksymalny komfort. Dzięki ergonomicznym rozwiązaniom zastosowanym w stołkach A-dec użytkownik może skoncentrować się na najważniejszym – czyli na pacjentach.

	Stołek stomatologa A-dec 521	Stołek asysty A-dec 522
Aktywny system siedziska	•	•
Cicho przesuwające się kółka	•	•
Profilowane oparcie	•	opcja
Regulowane nachylenie siedziska	•	tylko z opcjonalnym oparciem
Przesuwne podłokietniki	opcja	
Regulowana wysokość pierścienia pod stopy		•
Podnózek pod stopy		opcja



#### Cicho przesuwające się kółka

Rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia płynne, bardzo ciche przemieszczanie stołka zarówno na wykładzinie, jak i na twardej podłodze.



#### Regulacja ustawienia stołka

Czytelnie oznakowane dźwignie są łatwo dostępne, co umożliwia szybką regulację i łatwe czyszczenie.



#### Regulacja wysokości oparcia fotela

Przycisk zapewnia szybką regulację dokonywaną jedną ręką.

### Stołek stomatologa A-dec 521 Ustawienie odpowiedniej wysokości

W celu doboru właściwej wysokości stołka należy zmierzyć odległość od bioder do stóp.

Powyżej 86,36 cm (34 cale) — należy wybrać wysoki cylinder  
Poniżej 86,36 cm (34 cale) — należy wybrać niski cylinder



Stołek asysty A-dec 522 z opcjonalnym  
podnóżkiem pod stopy oraz oparciem



Stołek stomatologa A-dec 521 z opcjonalnymi  
przesuwnymi podłokietnikami



### Opcjonalny podnóżek pod stopy

Zastępuje okrągły pierścień pod stopy  
i umożliwia lepszy rozkład ciężaru  
ciała pomiędzy siedziskiem a stopami,  
umożliwiając zachowanie „pozycji  
aktywnej”.

## Stołki **A-dec 500** Wyposażenie opcjonalne i akcesoria

### Opcjonalnie podłokietniki przesuwne

Możliwość trzech regulacji – szerokość, wysokość i obrót –  
zapewnia lepsze podparcie i mobilność.

- Ramiona stomatologa są wygodnie podparte podczas zabiegów
- Łatwe przesuwanie podłokietników
- Regulowana wysokość podłokietnika



# Stołki A-dec 400

## Potwierdzona trwałość

Stomatolog zasługuje na komfort podczas długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Od lat nasze wytrzymałe konstrukcje siedzeń pomagają lekarzom w zachowaniu zdrowej pozycji ciała. Takie rozwiązania konstrukcyjne, jak: anatomicznie ukształtowane oparcie, regulowane podparcie tułowia, zaokrąglone brzoży siedziska oraz ergonomiczne nachylenie siedziska zmniejszają obciążenia kręgosłupa oraz zapobiegają bólom mięśni.

Polecamy dwa rodzaje poszycia stołków: tapicerkę szwową lub bezszwową, w szerokiej gamie kolorystycznej pozwalającej dobrać wystrój gabinetu. Warto zainwestować w stołki firmy A-dec, które zapewniają użytkownikom komfort oraz maksymalną wydajność podczas pracy.

	A-dec 421 Stołek stomatologa	A-dec 422 Stołek asysty
Profilowane oparcie	•	
Profilowane siedzisko	•	•
Ergonomiczne nachylenie	•	
Regulacja podparcia tułowia		•
Łatwy dostęp do dźwigni regulacyjnych	•	•
Regulowana wysokość pierścienia pod stopy		•

**Uwaga:** Stołki z serii A-dec 400 nie zawierają aktywnego systemu siedziska, który stanowi standard w serii A-dec 500.

Stołek asysty  
A-dec 422

Stołek stomatologa  
A-dec 421




Stołek stomatologa  
A-dec 421

### Ustawienie odpowiedniej wysokości

W celu doboru właściwej wysokości stołka należy zmierzyć odległość od bioder do stóp.

Powyżej 81,28 cm (32 cale) – należy wybrać wysoki cylinder  
Poniżej 81,28 cm (32 cale) – należy wybrać niski cylinder

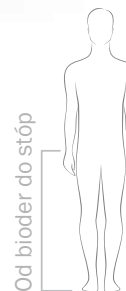

# Dostępne opcje tapicerki i kolorów

## Wszystko o kolorach

Wybór odpowiedniej gamy kolorystycznej pozwala stworzyć gabinet, który odzwierciedla osobowość użytkownika. Do wyboru: beższwowa lub szwowa tapicerka w szerokiej gamie kolorystycznej dla stołków A-dec 421 i A-dec 422. Dla stołków A-dec 521 oraz A-dec 522 dostępna tylko opcja z tapicerką szwową. Polecamy skorzystanie z inspiracji zamieszczonych w witrynie [a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe).


## Tapicerka szwowa (dostępna dla stołków serii A-dec 500 oraz A-dec 400)



## Tapicerka beższwowa (dostępna dla stołków serii A-dec 400)



Zamów próbki na stronie  
[a-dec.com/Color](http://a-dec.com/Color)

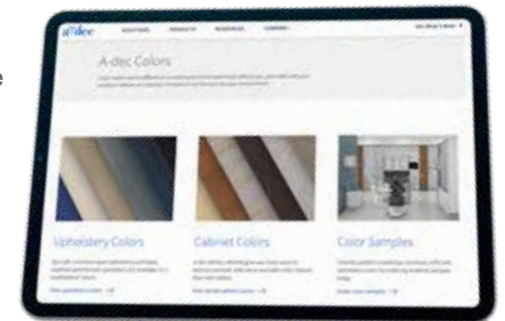

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.



**Siedziba firmy A-dec**

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA  
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie  
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady  
Faks: +1.503.538.0276  
a-dec.com

**A-dec Australii**

Tel: 1.800.225.010 z Australii  
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

**A-dec Chiny**

Tel: +400.600.5434 z Chin  
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

**A-dec Wielkiej Brytanii**

Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii  
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



W celu uzyskania dalszych informacji o ergonomicznych stołkach firmy A-dec lub uzyskania komplementarnej oceny ergonomicznej zapraszamy do odwiedzenia witryny [a-dec.com/500stools](http://a-dec.com/500stools).

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą się różnić od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec.

©2023 A-dec, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
85.6072.18/OP/500/9-17(2-23)/Rev C8