

Taburetes A-dec®

Asientos que están hechos para tener un buen rendimiento



a dec®

Taburetes A-dec 500 con buen rendimiento.

Máxima comodidad para el equipo de odontología

Usted proporciona el mejor cuidado a sus pacientes cuando puede trabajar con comodidad. Ahora, una solución única de asientos ergonómicos le permite hacer justamente eso. El A-dec 500.

El innovador taburete A-dec 500, que tiene años de investigación detrás de sí, está estratégicamente diseñado para ayudarlo a sentirse óptimo, de manera de poder desempeñarse en forma óptima.






Taburete de odontólogo A-dec 521

Taburete de asistente A-dec 522

Taburetes que permiten tener una postura saludable.

Los taburetes A-dec 500 fueron diseñados para adaptarse a su cuerpo y moverse con este. Por ejemplo, analicemos el asiento dinámico. Todo, desde el marco de suspensión hasta los materiales flexibles que se adaptan al cuerpo, está allí para un propósito: comodidad y apoyo. Las palancas para ajustar la posición son de fácil acceso y completan la personalización ya que le permiten hacer ajustes para mantener una postura ergonómicamente saludable durante todo el día.

Postura sentada saludable

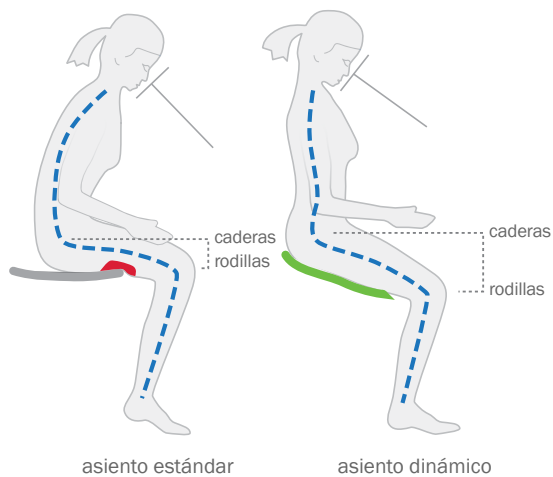

Nuestra respuesta a sus necesidades ergonómicas comienza con el ajuste de la forma en la que se sienta para evitar una columna con forma de “C” perjudicial. Esta postura saludable para sentarse se denomina “postura atlética”. Cuando se sienta con las caderas por encima de las rodillas, y el respaldo a baja altura y hacia adelante, su columna puede mantener una forma en “S” saludable. El asiento dinámico le permite disfrutar de comodidad y rendimiento mejorado.

Cuatro puntos de ajuste



La postura correcta reduce el estrés en las articulaciones y la columna, y proporciona mejor circulación en los pies y las extremidades. Los taburetes A-dec 500 tienen palancas numeradas fáciles de seguir que alientan el aumento de los ajustes personalizados en el transcurso del día, esto es muy importante si hay múltiples usuarios.

Sistema dinámico de asiento



Tres capas de asiento flexible se adaptan a todos sus cambios y movimientos:

- 1. Cojín de espuma** (capa superior): crea un nivel final de comodidad.
- 2. Armazón Comfort-flex** (medio): crea una superficie que se adapta al cuerpo, sobre la base de cuatro zonas de rendimiento.
- 3. Marco flexible** (base): soporta movimientos a gran escala.

Taburetes A-dec 500

Apoyo dinámico

Nuestros taburetes A-dec 500 están llenos de funciones y tienen un sistema de asiento dinámico con zonas de rendimiento único que se ajustan a la forma del cuerpo. Estas zonas de rendimiento trabajan al unísono para mantenerlo con apoyo mientras se desplaza, se inclina y trabaja. Otras características, tales como el respaldo contorneado, sirven de apoyo para la columna y brindan comodidad máxima. Con las soluciones de asiento ergonómicas de A-dec, puede enfocarse en lo que es más importante, sus pacientes.

	Taburete de odontólogo A-dec 521	Taburete de asistente A-dec 522
Sistema dinámico de asiento	•	•
Ruedas whisper quiet	•	•
Respaldo contorneado	•	opcional
Ajuste de la inclinación del asiento	•	solo con respaldo opcional
Apoyabrazos articulados	opcional	
Anillo de pie ajustable a la altura		•
Pedestal de pie		opcional



Taburete de odontólogo
A-dec 521



Ruedas Whisper Quiet
Su diseño proporciona un movimiento suave y extremadamente silencioso en alfombras y pisos duros.



Controles de ajuste
Se puede acceder fácilmente a las palancas numeradas para hacer ajustes rápidos y para limpiar con facilidad.




Control de altura de respaldo
Un botón pulsador facilita el acceso y los ajustes con una sola mano.

Taburete de odontólogo A-dec 521 Encuentre la altura correcta

Para elegir la altura correcta del taburete, mida desde las caderas a los pies.

Más de 86,36 cm (34 pulg.):
elija cilindro alto
Menos de 86,36 cm (34 pulg.):
elija cilindro estándar

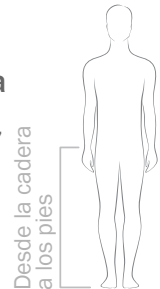

El taburete de asistente A-dec 522 con pedestal de pie y respaldo opcionales



El taburete de odontólogo A-dec 521 con apoyabrazos articulados opcionales



Pedestal de pie opcional

Reemplaza el anillo del pie para distribuir mejor el peso desde el asiento a los pies para tener una "postura atlética".

Taburetes **A-dec 500** Opciones y accesorios

Apoyabrazos articulados opcionales

Tres ajustes, ancho, altura y rotación, le brindan mayor apoyo y movilidad.

- Descanse los brazos mientras trabaja en la boca
- Corra los apoyabrazos con facilidad
- Ajuste de la altura de los apoyabrazos



Taburetes A-dec 400

Durabilidad icónica

Merece comodidad al sentarse que también dure. Durante años, nuestras soluciones de asientos duraderos han ayudado a los profesionales de odontología a sentarse en una posición saludable con apoyo. Las características como el respaldo con forma anatómica, el apoyo ajustable para el torso, los bordes redondeados del asiento y la inclinación ergonómica reducen el dolor muscular y la presión en los discos intervertebrales.

Seleccione el tapizado cosido o sin costuras en una extensa paleta de colores que seguro complementará su consultorio. Haga su próxima inversión en asientos con A-dec, estamos aquí para apoyarlo.

	A-dec 421 Taburete de odontólogo	A-dec 422 Taburete de asistente
Respaldo contorneado	•	
Asiento contorneado	•	•
Inclinación ergonómica	•	
Soporte del tronco ajustable		•
Palancas de ajuste de fácil alcance	•	•
Anillo de pie ajustable a la altura		•

Nota: Los taburetes A-dec 400 no incluyen el sistema de asiento dinámico, que es estándar en la línea de taburetes 500.

Taburete de asistente
A-dec 422

Taburete de odontólogo
A-dec 421



Taburete de odontólogo
A-dec 421

Encuentre la altura correcta

Para elegir la altura correcta del taburete, mida desde las caderas a los pies.

Más de 81,28 cm (32 pulg.):
elija cilindro alto
Menos de 81,28 cm (32 pulg.):
elija cilindro estándar



Opciones de tapizado y color

Todo sobre tonos

Use color para crear un consultorio que refleje verdaderamente su personalidad. Seleccione entre una amplia variedad de colores en tapizado sin costuras o cosido para A-dec 421 y A-dec 422. Opciones de solo cosido disponibles para A-dec 521 y A-dec 522. Inspírese en a-dec.com/InspireMe.

Tapizado cosido (disponible para taburetes A-dec 500 y A-dec 400)




Tapizado sin costuras (disponible para taburetes A-dec 400)



Los colores reales pueden variar. Consulte al distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores y la información más reciente sobre los productos.

Pida sus muestras en
a-dec.com/Color

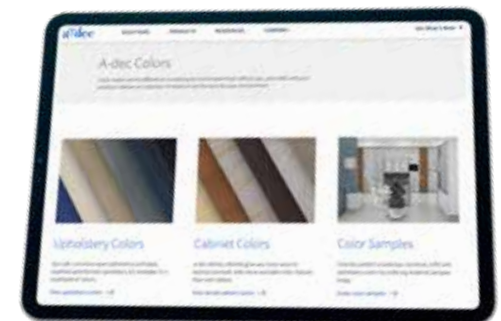



Oficina central de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 desde Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 desde fuera de Australia

A-dec China

Tel: 400.600.5434 desde China
Tel: +86.571.89026088 desde fuera de China

A-dec Reino Unido

Tel: 0800.233285 desde el Reino Unido
Tel: +44.(0).24.7635.0901 desde fuera del Reino Unido



Para obtener más información sobre asientos ergonómicos de A-dec o para solicitar una visita gratuita de asesoramiento ergonómico visite a-dec.com/500stools.

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactos y la información más reciente sobre los productos.

©2023 A-dec, Inc. Todos los derechos reservados.
85.6072.27/BB/500/6-22(2-23)/Rev D2